



CREATE IT.

Cabinet Dentaire Mobile

Dentalone / VIVAMATE G5



Des Soins Dentaires de Qualité pour Tous, Dans le Monde Entier.

Tout le monde sait qu'il est possible de soigner les caries. Pourtant, même de nos jours, dans certaines régions défavorisées du monde il est impossible de bénéficier de soins dentaires de base. Dans les pays développés disposant d'un nombre conséquent de praticiens, il peut être difficile de se rendre à leur cabinet - surtout pour les personnes âgées et celles à mobilité réduite. NSK a conçu une unité de traitement portable, aussi fonctionnelle qu'un cabinet, qui permet de réaliser des soins dentaires de haute qualité dans divers environnements. Grâce à des concepts innovants, le cabinet dentaire mobile de NSK propose une nouvelle façon de prodiguer des soins dentaires aux patients.

Sommaire

Dentalone	P 03-04
VIVAMATE G5	P 05-06
Produits en Rapport	P 07-08
Pièces Détachées & Accessoires	P 09



Dentalone

Cabinet Dentaire Mobile

Prendre Soins. Partout.*

Dentalone est un cabinet dentaire mobile prévu pour la dentisterie opératoire ou préventive dans les domaines comme l'humanitaire, les soins à domicile, les écoles, les hôpitaux et l'armée.

Avantages

- Compact & léger
- Simple d'utilisation
- Système «Plug 'n Play»
- Facile à transporter
- Ergonomique
- Extensible en fonction Cart
- Fonctionnalités étendues

Caractéristiques

- Tout le matériel nécessaire est présent dans une valise de transport avec poignée
- L'unité de contrôle avec la fonction déploiement permet d'envisager plusieurs positions selon les traitements
- Support d'instruments avec sélection automatique des instruments
- Compresseur sans huile intégré pour l'irrigation et la seringue
- Pompe d'aspiration intégrée



NLX nano Micromoteur Électrique

• Le micromoteur le plus petit et le plus léger disponible sur le marché.



Varios2 Lux Détartreur Ultrasonique Multifonction

• Moteur iPiezo assurant une puissance et une performance stable



Multi Pad

Panneau de Commande Multi-Control pour Système Intégré

• Identification visuelle sur l'écran possible même pendant le fonctionnement de la pièce à main.

- ECRAN de contrôle Multi Pad LCD
- Micromoteur sans charbon NLX nano (40 000 min⁻¹), avec lumière LED, irrigation interne et corps en titane
- Détartreur multifonction intégré Varios 170 avec lumière LED, pièce à main VA2-LUX-HP fine et légère
- Seringue eau/air avec lumière LED
- Canule d'aspiration
- Réservoir de 500 mL
- Conteneur à déchets 1 Litre



Dentalone Ensemble complet **LED**

MODÈLE : Dentalone RÉFÉRENCE : S9070

Contenu :

- 1 valise de transport ● 1 réservoir d'eau pour le spray ● 1 réservoir réceptacle pour l'aspiration ● 1 compresseur intégré
- 1 pompe d'aspiration intégrée ● 1 pédale de contrôle à vitesse variable ● 1 tablette extensible ● Sans contre-angle ni pièce à main

Spécifications :

Dimensions		
• Valise de transport (poignée baissée) : L 351 x P 405 x H 545 (mm)	• Hauteur de travail : 766 mm	
• Valise de transport (poignée tirée) : L 351 x P 405 x H 1 075 (mm)	• Poids avec coffre : 18,5 kg	
• Sans coffre : L 350 x P 405 x H 496 (mm)	• Alimentation secteur : CA 100 - 230 V 50/60 Hz	

VIVAMATE G5 Micromoteur Portable

Micromoteur Portable LED de Retouche pour Prothèse & Applications Générales

Le micromoteur portable VIVAMATE G5 propose diverses fonctions pour répondre aux besoins des dentistes en déplacement. En outre, l'unité de contrôle possède un design innovant qui lui confère une grande mobilité et maniabilité grâce à la possibilité d'utiliser la batterie rechargeable ou bien l'adaptateur secteur.



Ecran de Contrôle Offrant un Fonctionnement Simple et Intuitif

Les informations nécessaires sont faciles à consulter, telles que le réglage de la vitesse de rotation, puissance ON / OFF et niveau de batterie restant.

Micromoteur LED Spray Interne

La taille compacte du micromoteur a été spécifiquement développée pour la pratique dentaire mobile, il ne pèse que 148 g (sans cordon) et dispose d'un spray interne et d'une lumière LED. Complètement autonome, il fonctionne néanmoins comme un système de chirurgie répondant à un large éventail de traitements cliniques et est compatible avec vos contre-angles et pièces à main existantes, ce qui facilite la maîtrise du coût d'une dentisterie mobile.



*1 Conforme à la norme ISO 3964




Fonctionne à la Fois sur Batterie Rechargeable et sur Secteur

Grâce à sa mallette de transport ultra-compacte, le VIVAMATE G5 peut être emmené partout. Avec un encombrement réduit et un poids léger (moins de 500 g), l'unité de commande rechargeable vous suivra pour tous vos soins effectués hors cabinet.

Pédale de Contrôle (en option)

Permet d'ajuster facilement la vitesse du moteur sans quitter des yeux la zone de traitement.

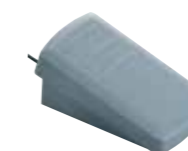

Mallette de Transport

Le VIVAMATE G5 est fourni avec sa mallette de transport pouvant également transporter ses différents accessoires.



Ensemble complet VIVAMATE G5 **LED**

MODÈLE : ENSEMBLE VIVAMATE G5 RÉFÉRENCE : Y1002801

Contenu :
 • Unité de contrôle • Support instrument • Adaptateur CA
 • Micromoteur et cordon • Cordon d'alimentation CA • Mallette de transport

Spécifications :

Unité de contrôle		Micromoteur	
• Dimensions	: L 72 x P 180 x H 36 (mm)	• Dimensions	: ø22 x L 68,6 (mm)
• Poids	: 370 g	• Poids	: 148 g (cordon moteur inclus)
• Temps de charge de la batterie	: env. 2 h*	• Vitesse	: 3 000-30 000 min ⁻¹
• Autonomie de la batterie en fonctionnement continu	: env. 1 h*	• Couple	: 3 Ncm (jusqu'à 30 000 min ⁻¹ en rotation)

*Varie en fonction des situations d'utilisation.

Produits en Rapport

Contre-Angle



Pour application générale 1:5 Multiplicateur
LUMIÈRE MODÈLE : Z95L RÉFÉRENCE : C1034

- Vitesse max : 200 000 min⁻¹ ● Pour fraises FG (φ1,6) ● Taille de la tête : φ8,9 × H 13,4 mm
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP résistant aux rayures ● Revêtement DLC ● Système anti-chauffe ● Roulements en céramique ● Griffe bouton-poussoir ● Quadruple spray ● Microfiltre
- Système Clean Head ● Barreau de quartz



Pour application générale 1:1 Rapport direct
LUMIÈRE MODÈLE : Z25L RÉFÉRENCE : C1038

- Vitesse max : 40 000 min⁻¹ ● Pour fraises CA (φ2,35) ● Taille de la tête : φ8,9 × H 13,7 mm
- Corps en titane avec revêtement DURAGRIP résistant aux rayures ● Griffe bouton-poussoir
- Simple Spray ● Microfiltre ● Système Clean Head ● Barreau de quartz



Pour prophylaxie 16:1 Réducteur
LUMIÈRE MODÈLE : X57L RÉFÉRENCE : C609

- Vitesse max : 2 500 min⁻¹ ● Pour brochettes et cupules à vis ● Rotation 360° ● Sans spray
- Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures ● Barreau de quartz



Pièce à main droite 1:1 Rapport direct
LUMIÈRE MODÈLE : X65L RÉFÉRENCE : H273

- Vitesse max : 40 000 min⁻¹ ● Simple Spray ● Pour fraises HP (φ2,35)
- Pour fraises CA (φ2,35)* ● Corps en titane avec revêtement DURACOAT résistant aux rayures ● Barreau de quartz

*Pour fraise courte, système d'arrêt de fraise fourni





Sonde Lumiere




LUMIÈRE MODÈLE : isoE-LUX RÉFÉRENCE : Z1265

- Connexion type E ● Barreau de quartz ● Corps en acier inoxydable

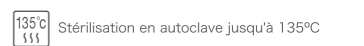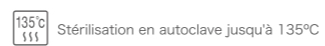





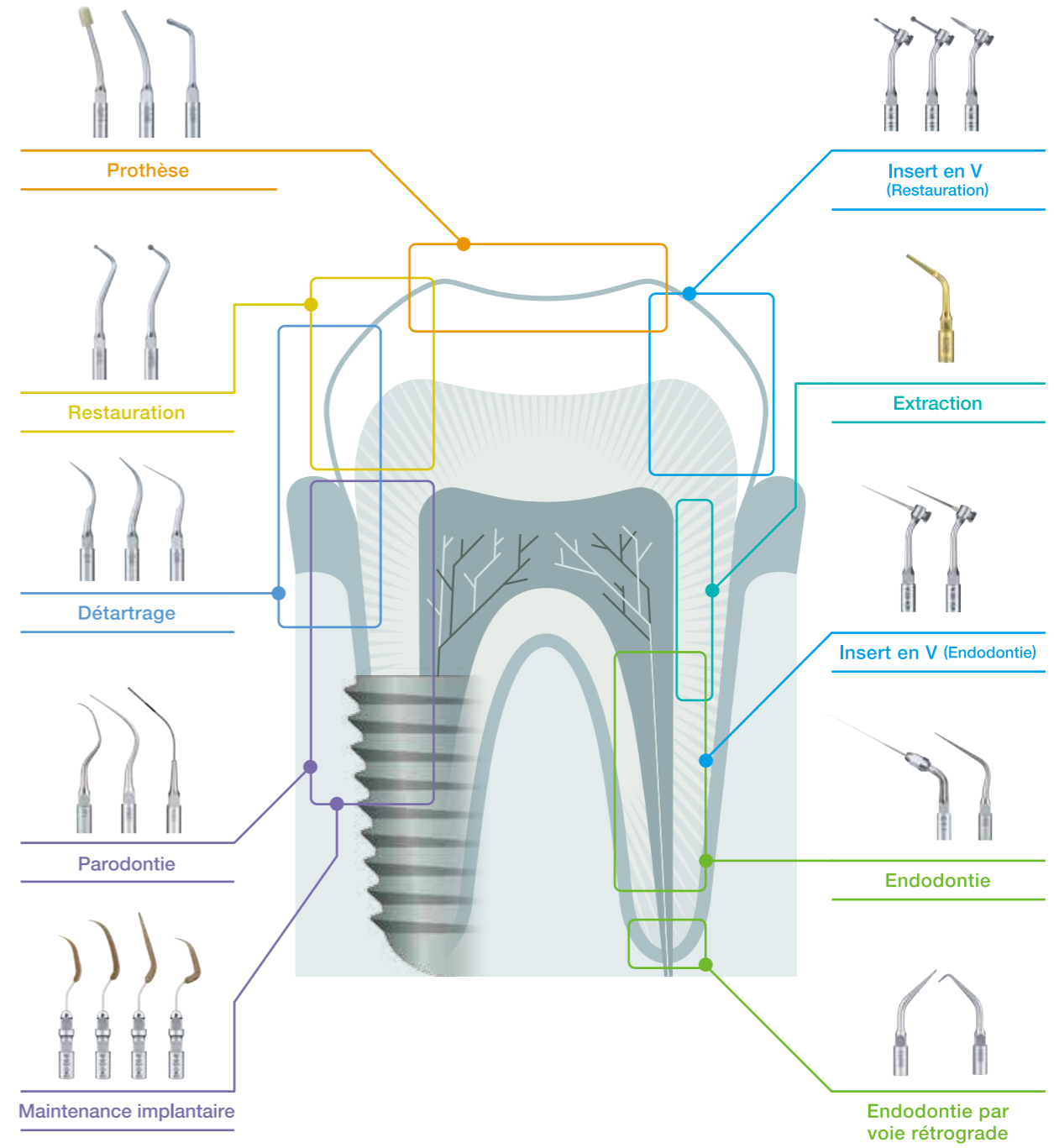



Inserts Ultrasoniques de Detartrage

NSK propose plus de 70 inserts ultrasoniques pour différentes applications cliniques.



Pièces Détachées & Accessoires

Dentalone

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
Cordon aspiration avec raccord		57064-1
Seringues 3F avec lumière		57066
Bouchon d'aspiration visse et monte		57068
Bouteille d'aspiration complète		57072
Réservoir d'eau complet		57069
Réservoir eau		57073
FC-76 Pédale de contrôle		Z1082
Plateau inférieur de transport		57088

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
Cordon moteur NLX		37074
Cordon pour Varios 170		37075
Canule interchangeable		37066
Filtre canule		37064.6
Adaptateur canule		37064.7
Cassette de stérilisation		Z1035001
Clé dynamométrique (CR-10)		Z221076

VIVAMATE G5

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
VIVAMATE G5 230 V Unité de contrôle		U1068004
VMG30EM MC VIVAMATE G5 Micromoteur avec cordon		E1069002
VMG30 VIVAMATE G5 Micromoteur		E1069052
VMG30 CD VMG30 câble moteur		E1069061
FC-76M Pédale de contrôle	 (Optional)	Z1082002

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
Support pièce à main		Z095206
Batterie		Y1002886
Adaptateur AC Pour VIVAMATE G5		U1115
Mallette de transport Pour VIVAMATE G5		Y1002171