

NSK
CREATE IT.



TOUT DEVIENT POSSIBLE

Pour prodiguer des soins dentaires de meilleure qualité, plus confortablement, où que vous soyez.

L'espérance de vie augmentant rapidement, il est de plus en plus nécessaire de recourir à des dispositifs de traitement itinérants. De nos jours, les personnes âgées conservent mieux leurs dentures ; il faut donc prodiguer des traitements plus élaborés sans que le patient ne se déplace. VIVA ace regroupe les commodités d'un cabinet dentaire dans un boîtier compact intégrant : micro-moteur multi-usages, détartreur à ultrasons, et bien plus encore. Facile à transporter, sa structure légère s'installe en toute facilité dans diverses situations. Avec ce dispositif totalement inédit et très fonctionnel, prodiguez des traitements dentaires en toute sécurité où que se trouve le patient.



Valise légère et compacte



Traitez efficacement, comme dans un cabinet dentaire



Montage et démontage faciles





Valise compacte et légère

Maniable et très légère : Elle pèse seulement 8,6 kg. Grâce à son volume compact, elle trouve tout de suite sa place dans une voiture et se transporte facilement. Emmenez-la partout, d'un site à l'autre. Pour obtenir ce dispositif mobile nous avons créé des éléments légers et compacts sans jamais oublier l'aspect fonctionnel.

Un véritable « tout-en-un »


Un micro-moteur, un détartreur à ultrasons, une seringue 3-en-1 et un dispositif d'aspiration ; le tout dans un boîtier compact doté d'espaces de rangement pour tous les instruments.

Hauteur
28,4 cm

Profondeur
29,8 cm

Largeur 46,2 cm

Emmenez-la partout :
Elle pèse seulement 8,6 kg.*

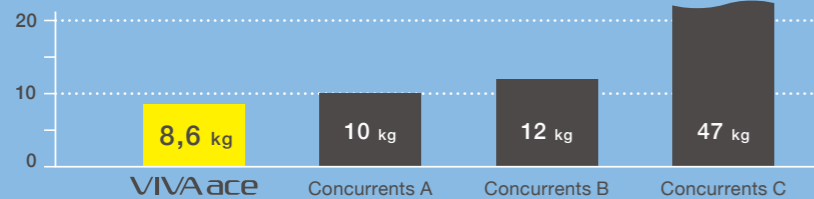

* Poids hors pièces à main



Aspiration

Détartreur à ultrasons

Micro-moteur à induction

Seringue 3-en-1

Réservoir de recueil
des fluides aspirés

Réservoir d'eau
potable

Ultra
fonctionnel
dans un boîtier
compact

Panneau de commande complet,
intuitif et facile à lire



Pédale de contrôle pour
commande au pied




** Les clichés montrent des éléments en option.



Cabinet dentaire mobile extrêmement fonctionnel, identique à un cabinet standard

Grâce au panneau de commande LCD, intuitif, très lisible, et au fonctionnement optimal de chaque instrument, bénéficiez d'une efficacité et d'une sécurité maximales.

Micro-moteur fiable, performant et compact

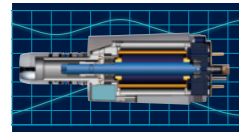

Parfaitement adapté à toutes les exigences de la dentisterie de pointe

Grâce à notre technologie de contrôle du vecteur de couple à 180°, bénéficiez d'une rotation fluide avec un couple élevé que la vitesse de rotation se situe dans une fourchette haute ou basse.



NLXplus

Fonction Endodontie complète

Le couple varie de 0,3 à 3,0 Ncm et inclut les fonctions auto-stop et auto-reverse (inversion) pour les traitements d'endodontie, et peuvent être réalisés à l'aide d'un contre-angle à rapport direct (1:1)

	Vitesse de rotation (min ⁻¹)	Couple (Ncm)
Mode thérapeutique Général	1 000 ~ 40 000	4,0
Mode Endodontie	100 ~ 5 000	0,3~3,0



Mode thérapeutique Général



Mode Endodontie

Détartreur à ultrasons multi-usages



Moteur à ultrasons NSK iPiezo

La technologie iPiezo délivre la puissance adéquate au niveau de l'insert en fonction de la surface. Elle assure une fréquence de vibrations stable en sortie sans aucune perte de puissance.



Varios2 Lux



Gamme exhaustive d'inserts

NSK vous propose plus de 70 inserts pour optimiser tout type de traitements cliniques :

- odontologique
- endodontique
- parodontique



Mode Détartrage

Seringue 3-en-1



Seringue 3-en-1 légère et facile à utiliser. L'embout de la seringue se détache grâce à un mécanisme extrêmement simple

Aspiration



Système de valve pour ajuster la puissance d'aspiration.

Commandes au pied

Pour les traitements réalisés par un seul praticien

En mode Sync., le micro-moteur, le détartreur à ultrasons et l'aspiration peuvent être mis sur MARCHE/ARRÊT à l'aide d'une seule pédale.



Micro-moteur, Détartreur & Aspiration

Pour les traitements réalisés par deux praticiens, 1 dentiste et 1 assistant(e)

Mettez le micro-moteur, le détartreur à ultrasons et l'aspiration sur MARCHE/ARRÊT à l'aide de deux pédales. En associant les deux, le dentiste peut se concentrer sur le fonctionnement du micro-moteur et du détartreur.



Micro-moteur & Détartreur

Aspiration

Sonde lumineuse (en option)

Pour bien éclairer la cavité buccale, quel que soit l'environnement thérapeutique. Bonne accessibilité grâce au corps fin qui permet également d'accéder à des zones difficiles à voir.




isoE-LUX









Installation et rangement rapides

Installation et rangement simples, faciles et rapides = travail plus efficace et plus simple.
Les porte-instruments et le bras peuvent être réglés à 4 hauteurs différentes.

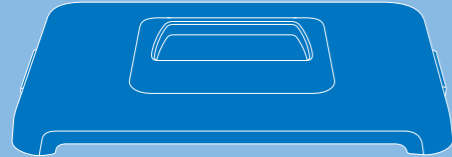

L'hygiène est également préservée puisque les éléments qui touchent le sol sont stockés dans un compartiment séparé, doté d'un couvercle.

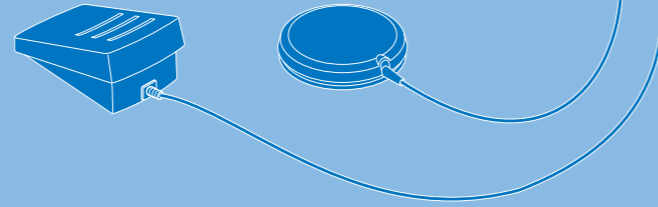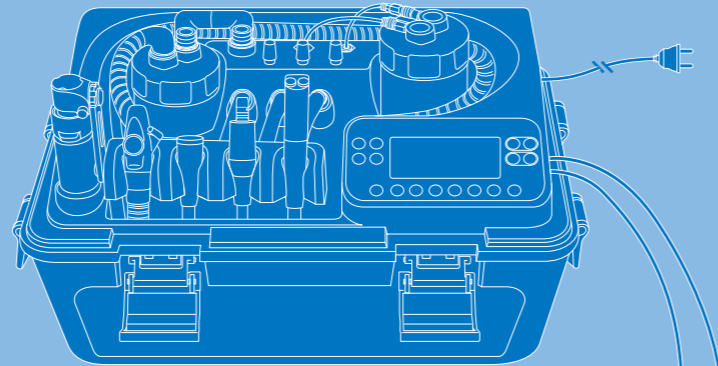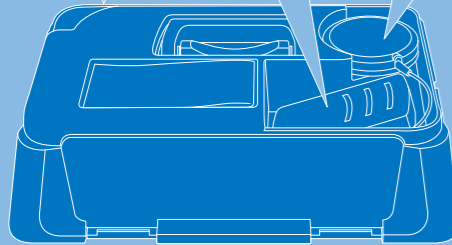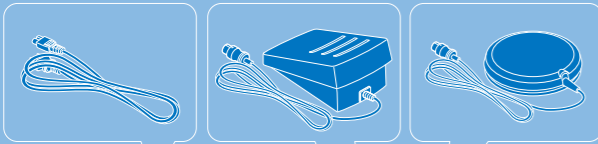


OUVREZ



INSTALLEZ



RÉGLEZ

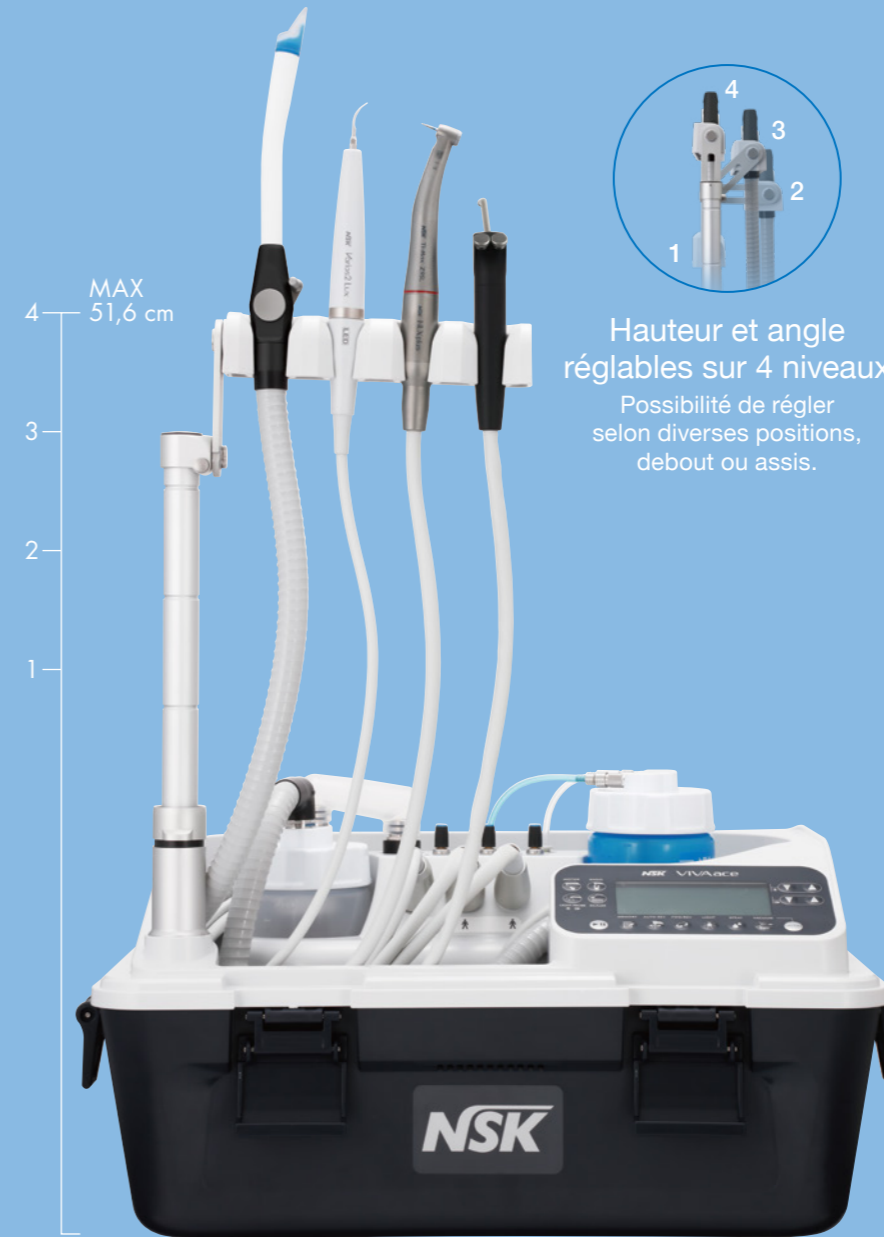

Hauteur et angle réglables sur 4 niveaux

Possibilité de régler selon diverses positions, debout ou assis.



Rangement rapide

Nécessité de retirer uniquement les pièces à main



Entretien simple

VIVA ace

Valise VIVA ace complète

MODÈLE VIVA ace 230 Complete Set

RÉF Y1003773

Contenu

- Coffret VIVAace 230 de base
- Moteur VIVAace
- Démarreur VIVAace



Caractéristiques techniques (commande)

- Dimensions: L 462 x P 298 x H 284 mm
- Poids de l'appareil: 8,6 kg
- Alimentation électrique: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Source d'alimentation (entrée): 130 VA

MODÈLE Coffret VIVAace 230 de base

RÉF Y1003774



Contenu

- Commande
- Cordon d'alimentation CA
- Pédale (FC-76S)
- Pédale (FC-70S)
- Boîtier supérieur
- Jeu de tuyaux V-ace Vide
- Flacon V-ace Vide
- Embouts V-ace Vide (10)
- Jeu de flacons d'eau V-ace
- Jeu de seringues à 3 voies V-ace
- Bandoulière

MODÈLE Moteur VIVAace

RÉF E1040002



Contenu

- Moteur NLX plus
- Cordon d'alimentation du moteur
- Capot du moteur
- Capuchon de protection

MODÈLE Démarreur VIVAace



RÉF E351006






Contenu

- Pièce à main VA2-LUX
- Cordon d'alimentation du démarreur
- Insert (G6, G8)
- Clé à insert
- Porte-insert








OPTIONS

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Z95L	 1:5 multiplicateur	C1034
Z25L	 1:1 Rapport direct	C1038
X65L	 1:1 Rapport direct - Pièce à main	H273

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
X57L	 16:1 Réduction - Prophylaxie	C609
isoE-LUX		Z1265
Embouts V-ace Vide (jeu de 10)		S900070

PIÈCES DÉTACHÉES

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
Jeu de tuyaux V-ace Vide		U1144074
Réservoir		U1146070
Jeu de flacons d'eau V-ace		U1144040
V-ace Embout pour seringue à 3 voies		U1144046
V-ace Tuyau de connexion		U1144753
Capuchon réservoir A		U1144750
Capuchon réservoir B		U1144751
Capuchon tuyau		U1144752
V-ace Set de flacon d'irrigation (EBM ou eau stérile)		U1146080

MODÈLE	PRODUITS	RÉF
FC-76S		Z1082005
FC-70S		Z1008006
Cordon AC		U439550
V-ace Bandoulière		U1144370
Joint (Pour flacon d'eau)		U1144729
Joint (Pour sonde d'aspiration)		U1144636
Joint (Pour sonde d'aspiration)		Z1137352
Filtre		U1144727